


GREEN & CLEAN AD

METASYS

DE Achtung
EN Warning
FR Attention
IT Attenzione
SV Varning
SL Pozor
FI Varoitus
NO Advarsel

DA Advarsel
HU Figyelem
ET Hoiatus
LV Uzmanību
LT Atsargiai

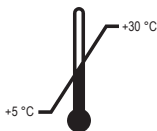

UFI: FV00-E0WD-300Q-FCRV

e 5000 ml
CE 0044

RD-54.008/04
2019-07

 **METASYS Medizintechnik GmbH**
Florianstraße 3
6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Tel.: +43 512 205420
info@metasys.com | www.metasys.com

Produktidentifikatoren / product identifiers:

2-Amino-ethanol [141-43-5], N,N-Didecyl-N-methyl-poly
(oxethyl)ammoniumpropionat [94667-33-1],
N-(3-Aminopropyl)-N-docecylopropan-1,3,-diamin [2372-82-9]



DE: Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen und nachhaltigen Tauchdesinfektion aller prothetischen Arbeiten und von getragenen Zahnersatz, sowie von zahntechnischen Abformungen aus Silikon, Polyether und Alginat. Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten: begrenzt viruzid (z.B. HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; bakterizid (z.B. C. albicans); 5 Min., tuberkulozid; 5 Min., Anwendung: GREEN&CLEAN AD ist gebrauchsfertige, Abformung direkt nach Entnahme aus dem Patientenmund mit Wasser abspülen und in die Lösung einlegen. Nach Ablauf der Einwirkzeit (5 Min.) Desinfektionsmittel durch abermaliges Spülen mit Wasser entfernen. Die Lösung verfügt über eine hervorragende Reinigungswirkung, daher ist kein Zusatz von Reinigungsmitteln erforderlich. Standzeit: 1 Woche. Bei starker organischer Belastung wird empfohlen, die Lösung häufiger zu erneuern. Verschließen Sie den Behälter während Einwirkzeit und Standzeit, um ein Verdunsten zu vermeiden. **ACHTUNG:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wassergorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett beibehalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Zusammensetzung: 100 g enthalten: Alkylamin (1-2 g), Dialkylmethyloxyethylammoniumpropionat (0-1 g), Alkylpolyglykosid (0,2 g), Ethanolamin (0,3 g), Wasser

EN: Highly effective, ready-to-use solution for the rapid and sustained immersion disinfection of all prosthetics, dentures as well as dental impressions made of silicone, polyether and alginate. Spectrum of efficacy/action times: limited virucidal (e.g. HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; bactericidal, fungicidal (C. albicans); 5 min.; tuberculocidal; 5 min. Application: GREEN&CLEAN AD is ready-to-use. Rinse impression with water directly after removing it from the patient's mouth and insert into the solution. After elapsed contact time (5 min.), rinse again with water to remove remaining disinfectant. The solution has an excellent cleaning power, therefore no additional cleaning agents are required. Standing time: 1 week. In case of strong organic load it is recommended to renew the solution more frequently. Close container during action time and standing time, to prevent evaporation. **WARNING:** Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Composition: 100 g contain: alkylamine (1-2g), dialkylmethyloxyethylammoniumpropionate (0-1g), alkylpolyglycoside (0,2g), ethanolamine (0,3g), water

FR: Solution ultraperformante, prête à l'emploi pour la désinfection par trempage de tous les travaux prothétiques et prothèses dentaires, ainsi que les moulages dentaires en silicone, polyéther et alginates. Spectre/temps d'action: virucide sur virus enveloppés HBV/HCV/HIV/HSV1 inclus; 5 min.; bactéricide, fongicide (C. albicans); 5 min.; tuberculicide; 5 min. Mode d'emploi: Le GREEN&CLEAN AD est prêt à l'emploi. Rincer les empreintes et les plonger dans la solution désinfectante; la solution a une excellente action de nettoyage, inutile d'ajouter un autre nettoyant. Le temps d'action écoulé (5 min), rincer à nouveau afin d'enlever le désinfectant. Temps de conservation du bain: 1 semaine. Il est recommandé de changer la solution plus régulièrement si elle est contaminée organiquement. Maintenir le couvercle du bac de désinfection fermé afin d'éviter toute volatilisation. **ATTENTION:** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et vêtements de protection appropriés. Protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement éliminées. Continuer à rincer. Composition: 100 g de solution contiennent: alkylamines (1-2g), dialkylmethyloxyethylammoniumpropionate (0-1g), alkylpolyglycosides (0,2 g), éthanolamine (0,3 g), l'eau

IT: Soluzione disinfettante ad alta efficacia pronta all'uso per l'immersione rapida e durevole di tutti i lavori protesici e le protesi dentistiche, inoltre le impronte in silicone, polietere e alginati. Spettro/tempo d'azione: limitatamente

la virucida (per es. HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; battericida, fungicida (C. albicans); 5 min.; tuberculocida; 5 min. Utilizzazione: GREEN&CLEAN AD è una soluzione pronta all'uso. Sciaccare l'impronta subito dopo il prelievo dalla bocca del paziente con acqua e mettere nella soluzione. Dopo la scadenza del tempo d'azione rimuovere il disinfettante sciacciando l'impronta ripetutamente con acqua. La soluzione dispone di un'eccezionale effetto detergente, quindi non occorre aggiungere un detersivo. Durata della soluzione preparata: 1 settimana. In caso di forte carico organico si consiglia di cambiare la soluzione più frequentemente. Chiudere la vaschetta durante il tempo d'azione e la durata della soluzione preparata per evitare l'evaporazione. **ATTENZIONE:** Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/visi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciaccare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccare. Composizione: 100 g contengono: alchilammine (1-2g), dialkilmethyloxyethylammoniumpropionate (0-1g), alchilpoliglicosidi (0,2 g), etanolammina (0,3 g), acqua

SV: Högrvaksam, bruksfärdig lösning för snabb och bestående dykdesinfektion av alla protesarbeten och tandersätningar som bärs, liksom avgjutningar av silikon, polyeter och alginat. Aktivitetsspektrum och åtgärdsdåring: begränsat virusdödande (t.ex. HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; bakteriedödande/svampdödande: 5 min.; TBC-dödande: 5 min. Användningsrekommendation: GREEN&CLEAN AD är klar att användas. Skölj avtrycket med vatten direkt efter du lagt ut det från patientens mund och placera det i lösningen. Efter kontakttiden (5 min.) skölj du avtrycket igen för att få bort kvarvarande desinfektionsmedel. Lösningen har utmärkt rengöringskraft. Därefter behövs inget ytterligare rengöringsmedel. Ståtid 1 vecka. Om det finns stark organisk ämnen rekommenderas att byta lösningen oftare. Stäng behållaren under behandlings- och ståtid för att förhindra avdunstning. **VARNING:** Irriterar huden. Orsakar allvarig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras otkämligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddsskador/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sammansättning: 100g innehåller: alkylaminer (1-2g), dialkylmethyloxyethylammoniumpropionat (0-1g), alkylpolyglykosider (0,2 g), etanolamin (0,3 g), vatten

SL: Visoko učinkovita za uporabo pripravljena rešitev, namenjena hitremu in trajnemu postopnemu razkuževanju vseh protetičnih del in nošenih zobnih protez, kakršne so zobozdravstveni modeli iz silikona, polietra in alginata. Spekter/čas učinkovanja: omejen virucidni učinek (npr. HBV/HCV/HIV, virusi Herpes-simplex tipa I); 5 minut; baktericidno/fungicidno (C. albicans); 5 minut; tuberkulocidno; 5 minut. Uporaba: Po uporabi na pacientnih dajtelj modelne materiale v dezinfekcijsko raztopino. GREEN&CLEAN AD učinkuje v 5 minutah baktericidno inkl. Tudi, fungicidno in deaktivira virus (HBV/HIV/HCV, virusi Rota). GREEN&CLEAN AD izvrstno očisti, dodatna sredstva niso potrebna. Raztopina deluje 1 tedna. Pri močni organski obremenitvi priporočamo pogostejšo menjavo raztopine. **POZOR:** Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Skodljivo za vodne organizme, za dolgotrajni učinki. Če je poletno zdravniški nasvet, morajo biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosegov otrok. Prepreči sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odrsanite kontaktne leče, če jih imate in je to lahko storite brez težav. Nadajljulj z izpiranjem. Sestava: 100 g vsebuje: alkilamini (1-2g), dialkilmethyloxyethylammoniumpropionat (0-1g), alchilpoliglikozidi (0,2 g), etanolamin (0,3 g), vode

ET: Erittäin tehokas, käyttövalmis liuos kaikkien proteesien ja jälennösten desinfiointivarten vartoon.Voidaan käyttää alginatiteille, silikoneille ja polyeetteri-kuopastille. Tehoaikavaikutuksia: HBV/HCV/ HIVm Herpes-simplex virus tyyppi 1: 5 minuuttia, bakteeritaimienest. (C. albicans), MRSA: 5 minuuttia, tuberkuloosi: 5 minuuttia. Käyttö: GREEN&CLEAN AD on käyttövalmis. Huuhtele muuttia vedellä heti otettua sen potilaan suusta ja aseta se liuokseen. Poista desinfiointiaine vaikutusajan (5 minuuttia) kuluuttu huuhuttelemaa vedellä. Liuoksen puhdistusaste on erinomainen, joten lisäpuhdistusainetta ei tarvita. Kestoaike: 1 viikko. Voimakkain organisen kuormituksen yhteydessä suosittelmeen vaihtamaan liuoksen useammin. Sulje säiliö vaikutusajan

kestojan ajaksi vältääksesi aineen haittuituminen. **VAROITUS:** Ärsyttävä aine. Ärsyttävä voimakkaasti silmiä. Haitallista vesilielille, pitkäaikaisissa haittavaikutuksissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Valittavissa pääammitisä ympäristön. Käytä suojakäsineitä/suojaväestusta/silmensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pölynsiini, medical voi tehdä helposti. Jälki huuhdotessa. Vaukkauttaa aineet: 100 grammaa sisältäjä: alkylamiini (1-2g), dialkylmetyloxyethylammoniumpropionate (0,1 g), alkylpolyglykosideilla (0,2 g), etanoliamiini (0,3 g), vettä

HO: Hyöfektivitet, brukstklar løsning til rask og grundig dypdesinfisering av alle protetiske arbeider og brukte prosesser samt tannmedisinske prosesser av silikon, polyeter og alginater. Virkningspekter/varikett: begrenset virusdrepende middel (f.eks. HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; bakteriedrepende / oppdrepere; (C. albicans): 5 min.; tuberkulocid; 5 min. Bruk: GREEN&CLEAN AD er klar til bruk. Vask med vann, så snart de blir fjernet fra pasientens munn og plassere dem i oppløsningen. Etter 5 minutter: Skyll med vann etter kontakt for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel. Løsningen har en utmerket renseseffekt, og krever derfor ingen ytterligere vaskemiddel. Effektivitet: 1 uke. Hvis det er en tung organisk belastning, er det anbefalt å fornye oppløsningen oftere. Lukk beholderen i effekt og innvirkning på tide å unngå fordampning. **ADVARSEL:** Irriterer huden. Gir alvorlig øyerritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, har produktets beholder eller etikett for händen. Oppbevars utlignelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Bær vernehansker/verneklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sammensetning: 100 g inneholder: alkylamin (1-2g), dialkylmetyloxyethylammonium-etyl propionat (0,1g), alkylpolyglykoside (0,2 g), etanolamiini (0,3 g), vann

HO: Brugsstærkt løsning til desinfeksjon og rengjøring av samtlige materialer til affrykingsstasjon og protetik arbeid. Virkningspektrum/virkningstid: begrenset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; bakteriedræbende/svampdræbende middel (C. albicans): 5 min.; tuberkuldræbende middel: 5 min. Ansvønging: GREEN&CLEAN AD er klar til bruk. Skyll instrumentene med vann, så snart de fjernes fra pasientens munn og anbring dem i oppløsningen. Etter 5 minutter: Skyll etter med vand efter kontakt for å fjerne resterende desinfeksjonsmiddel. Oppløsningen har en fremragende rengjøringseffekt, og derfor kræves der ikke noget yderligere rengøringsmiddel. Effektivitet: 1 uge. Hvis der er tale om en kraftig organisk belastning, anbefales det at fornye opløsningen oftere. Luk beholderen i virknings- og effekttiden for at undgå fordampning. **ADVARSEL:** Forsårsager hudirritation. Forsårsager alvorlig øjnerirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevars utlignelig for barn. Unngå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøj/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Sammensetning: 100 g inneholder: alkylamin (1-2g), dialkylmetyloxyethylammoniumpropionate (0-1g), alkylpolyglykosides (0,2 g), etanolamin (0,3 g), vann

HU: Hatékony, használatra kész megoldás gyors és tartós fertőtlenítéshez az oldatba mártva minden pótló munkát és használt fogkezelő, valamint szilikonból, polieterből és alginátból készült fogászati mintákhoz. Elkészítés: quartier ammóniumvegyületek, alkalin, nem ionos tenzid, víz. Formaldhid- és fenolmentes. A használt fogtöplést mártsa bele az oldatba, várja meg, hogy hasson, majd vízzel öblítse le a fertőtlenítőszert. Használat: A mintát vízzel öblítse le és a mintavétel kanálal helyezze az oldatba közvetlenül azután, hogy kivette a beteg szájából. A hatásideje letele után a fertőtlenítőszert ismételt vízes öblítéssel távolítsa el. Hatásidő: bakteriumölő (tuberkulocidizis), gombacölő és korlátoltan vírusölő (HBV/HCV/HIV); 5 perc után. A hatásideje nem lépje túl Állásidő: 1 hét. Erősebb organikus terhelés esetén az oldatot érdemes gyakrabban lecserélni. A hatásideje az állás ideje alatt járja be a tartóit, hogy az oldat ne párolgjon el. **FIGYELM:** Használat közben vigyázni meg kellő védőeszközök el- és személtelése, hogy az oldat ne érintkezzen a bőrével és ne kerüljön a szemébe. Ha ez mégis megtörténik, akkor bő vízzel öblítse ki. Gyermekektől társat való. Ne vegye a szájból! Tartsa be a szokásos védintézkedéseket és a biztonsági adatlap utasításait, amikor folyékony vegyszerekkel dolgozik. Összetevők: 100 g termék tartalmaz: alkilamin (1-2

g), dialkyl-metoxi-etil-ammónium-propionát (0,1 g), alkil-poli-glikolid (0,2 g) és etanolamin (0,3 g).

HO: Valmilhus gjænjende ta prosteedite desinfiseringsseks. Sobic kasutameseks alginatid, silikoni, polieterer kummi ja hidrokoloidid puhul. Desinfitseerimesse spektre/temajaed: piratud viiruste-kaitse (nt. HBV/HIV/HCV, herpesvirsus tüüp 1); 5 minutit, bakteritsidne/fungitsidne (C. albicans): 5 minutit, tuberkuloovastane kaitse: 5 minutit. Kasutusjuhend: vaa vedelik desavanni. Lilepuudnud materjalid peaksid olema lahuses 5 minutit. Kata desavanni kasutamisel järeldada desinfitseerimise peale seda, kui oled need kasutanud patsiendi. GREEN&CLEAN AD on bakteritsidne, fungitsidne ja viiruscidid inaktiveeriva toimega (HBV/HCV/HIV) juba 5 minuti peale kasutamist. GREEN&CLEAN AD on väga hea puhastava toimega, pole vaja mingit täiendavat vahendit. Lahus on kasutuslooblik 14 päeva. Kui orgaaniliste ainetes osakaal on suur, on soovitatav lahus vahetada tühedami. **HOIATUS:** Põhjustab nahariitust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohtlik veerorganismidele, pikajaline toime. Arsti peale pöördudes võta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida satumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastusi/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui need kasutatakse ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Koostis: 100 g sisaldab: alkilamiini (1-2g), dialkylmetyloxyethylammoniumpropionate (0-1g), alküülpöglükosidide (0,2 g), etanolamiini (0,3 g), vees

HU: Lõi efektívus, gátasvatiolán skidúms viszu iznemamo protézu u silikonu, poliétera u alginátu nospiudiumu átrai u noturígai ígremdéšanas defzinifikajai. Defzinifikanta spektres/ídarabias laiks: íerobéta virusu íziníciánsis (piem, HBV/HCV/HIV, HSV-1); 5 min.; baktericidus/fungicidus (C. albicans): 5 min.; tuberkulocidus: 5 min. Lítóšana: GREEN&CLEAN AD ir gatavs lítóšanai. Noskolajiet nospiudumu ar ūdeni uzreiz pēc izņemšanas no pacienta mutes un ieleicet skidúmā. Pēc tam, kad ídarabias laiks ir pagájis, atkártoji noskolajiet ar ūdeni, lai noskolotu atlikušo defzinifikācijas līdzekli. Skidúmam ir íeliska íríšanas spēja, tādél nav nepieciešams papildu íríšanas līdzeklis. Turéšanas laiks: 1 nedéļa. Lietas organiskās slodzes gadījumā íeteicams atjaunot skidúmu bezakš. Nosdziedz íverti darbus un turéšanas laiku, lai íerobētu izvalkošanos. **UZMANÍBU:** Karināa udu, ízraisa nepatīkamu ígri, ígri arimājumu. Samílis ūdens organismiem ar ígri ístojšām sákām. Medicíniskā padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādíta uz íepakojumu vai etiketes. Sargat no bērniem. Izvairieties no izplatíšanas apkártejā veld. Izmantot aizgarcidmus/aizsargdrébes/acu aizsargus/séjas aizsargus. SASKARE AR ACIM: uzmanzíj aizskart ūdeni varkás mutes. Izmetni kontaktlācas, ja tās ir vieglotas un ja ir viegli izdarít. Turpínat skait. Sastávs: 100 g satur: alkilamínu (1-2g), dialkylmetyloxyethylammoniumpropionate (0-1g), alkylpolyglycosides (0,2 g), etanolamínu (0,3 g), ūdens

HU: Stipras poveikio, paruoštas naudoti tirpalas, skirtas visu protezavimo dirbiniu, naudotoj protezu ir dantu apsaudei iš silikono, polieterio ir alginato trumplaikėbei bei ilgalaikė defzinifikacijai mirkanti. Puienos medžiagos tolioravimui. Be formaldehidu ir fenolio. Naudojimo trukmė: 7 dienas. Defzinifikavimo spektaras/veikimo laikas: ribotas viruscidinis (pvz., HBV/HCV/HIV, I tipo paprastas herpeso virusas); 5 min., baktericidinis/fungicidinis (C. albicans): 5 min.; tuberkulicidinis: 5 min. Naudojimo strius: Paruoštas naudojimo tirpalas, skirtas greitai visų apsaudei u protezu iliejimo medžiagu, tokiu kaip silikono, alginatui, hidrokoloidai ir apsaudei/šaukanti, defzinifikacijai ir valymui. Sudėkite iliejimo medžiagas i defzinifikacijos tirpalą po to, kai jie buvo panaudoti pacientui. GREEN&CLEAN AD pasižymi stipriomis valymo savybėmis, jokiu tik papildomu medžiagu nereikia. Naudojimas: Supilkite tirpalą i plavimo vonele. Alginatus ir hidrokoloidinis medžiagas reikia trumpam panardinti ir palikti 5 minučių nužditi. Kitos medžiagos turi būti mirkomos tirpale 5 minučių. Mirkymo metu laulu uždenkite. Daugiau detaliu išskokite saugaus darbo instrukcijoje. **ATSARGIAI:** Dirgina odą. Sukelia smarku akių dirginimą. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalingu gyvyto konsultacija, su savimi turėkite produkto talpykla ar jo etikete. Laikyti vaikams nepriejamose vietoje. Saugoti, kad nepatektų i aplinką. Mūvoti apsaucines prištines/indėvė apsaucinius drabuštus/naudoti akiu (vėd) apsaucines priemes. PATEKUS I AKIS: Kauti minutis atpaikinti plauti vandeniu. Išliuti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra i jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akiu. Sudėtis ir savybės: 100 g; alkylamínu (1-2g), dialkylmetyloxyethyl-ammóniumpropionate (0-1g), alkylpolyglycoside (0,2g) u etanolamínu (0,3g). Registracijos Nr. 15924-2000