

GREEN & CLEAN SD

METASYS

DE Achtung

EN Warning

FR Attention

IT Attenzione

ES Atención

PT Atenção

NL Waarschuwing

SV Varning

FI Varoitus

NO Advarsel

DA Advarsel

EL Προσοχή

PL Uwaga

CS Varování

SK Pozor

SL Pozor

HR Pozor


HU Figyelem

ET Hoiatus

LV Uzmanību

LT Atsargiai

IS Varúð

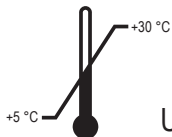

UN 1987

UFI: R710-F0NY-A00P-3R34

e5000 ml

CE0044

RD-54.012/04
2019-05

 **METASYS Medizintechnik GmbH**

Florianstraße 3

6063 Rum bei Innsbruck, Austria

Tel.: +43 512 205420

info@metasys.com | www.metasys.com

Produktidentifikatoren / product identifiers:

Ethanol [64-17-5], Propan-2-ol [67-63-0],

Didecyl dimethyl ammoniumchlorid [7173-51-5], Glyoxal [107-22-2]

LOT



02 Alkoholiske Sprødesinfektion zur Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. alkoholunempfindliche Oberflächen der dentalen Einheit).
Kurz Einwirkzeit. Gebrauchsfertige Desinfektionslösung. Formaldehydfrei.
Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten: begrenzt viruzid (z.B. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Typ I); 30 Sekunden; bakterizid, fungizid (C. albicans): 1 Minute; tuberkulozid: 5 Minuten. Anwendung: GREEN&CLEAN SD ist gebrauchsfertig. Füllen Sie es einfach aus dem Kanister in die 750 ml Sprühflasche. Die zu desinfizierende Fläche sollte bis zur vollständigen Benetzung eingesprüht werden. Die Fläche selbständig trocknen lassen. ACHTUNG: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Zusammensetzung: 45% Ethanol, 15% 2-Propanol, 0,2% quartäre Ammoniumverbindungen, 0,2% Glyoxal

03 Alcoholic spray disinfectant for disinfecting the surfaces of medical devices (e.g. surfaces of dental units insensitive to alcohol). Short action time. Ready-to-use solution. Formaldehyde-free. Spectrum of efficacy/action times: limited virucidal (e.g. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I); 30 seconds; bactericidal, fungicidal (C. albicans): 1 minute; tuberculocidal: 5 minutes. Application: GREEN&CLEAN SD is ready for use. Pour the contents of the GREEN&CLEAN SD canister into the 750 ml spray flask. Spray the product on the surface to be disinfected until completely wet. Leave the surface to dry. WARNING: Flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Composition: 45% ethanol, 15% 2-propanol, 0.2% quaternary ammonium compounds, 0.2% glyoxal

04 Spray à base d'alcool par pulvérisation pour la désinfection des surfaces de dispositifs médicaux (par exemple, surfaces insensibles à l'alcool de l'unité dentaire). Efficacité rapide. Solution prête à l'emploi. Sans formaldéhyde. Spectre/temps d'action: virucide sur virus enveloppés HBV/HCV/HIV/Herpes-simplex typ I inclus; 30 secondes; bactéricide, fongicide (C. albicans): 1 minute; tuberculocide: 5 minutes. Mode d'emploi: Le GREEN&CLEAN SD est prêt à l'emploi. Verser le produit dans le flacon pulvérisateur 750 ml. Humidifier entièrement la surface à désinfecter. Laisser sécher. ATTENTION: Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Composition: 45% d'éthanol, 15% de 2-propanol, 0,2% de composés d'ammonium quaternaire, 0,2% de glyoxal

05 Disinfectante spray a base d'alcool per la disinfezione di superfici di dispositivi medici (per es. superfici non sensibili all'alcool del riunito dentale). Azione rapida. Soluzione disinfectante pronta all'uso. Senza formaldeide. Spettro/tempi d'azione: limitatamente virucida (per es. HBV/HCV/HIV, herpes simplex tipo I); 30 secondi; battericida, fungicida (C. albicans): 1 minuto; tuberculocida: 5 minuti. Utilizzazione: Il prodotto è pronto per l'uso. Basta versare GREEN&CLEAN SD nella bottiglia a spruzzo da 750 ml. Spruzzare il prodotto sulla superficie che va da disinfeettare fino a quando è interamente bagnata. Far asciugare da sola la superficie. ATTENZIONE: Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Composizione: 45% etanolo, 15% 2-propanolo, 0,2% composti di ammonio quaternario, 0,2% glicossale

06 Spray a base de alcohol para la desinfección de las superficies de productos médicos (como p. ej., superficies de la unidad dental resistente al alcohol). Acción rápida. Preparado listo para usar. No contiene formaldehído. Espectro de acción/tempos de acción: virucida limitado (por ejemplo, HBV/HCV/HIV, herpes simple tipo I); 30 segundos; bactericida, fungicida (C. albicans): 1 minuto; tuberculocida: 5 minutos. Modo de empleo: GREEN&CLEAN SD está listo para su uso. Verter GREEN&CLEAN SD en el envase pulverizador de 750 ml. Mojar enteramente la superficie a desinfectar haciendo una pulverización. Dejar secar la superficie sin pasar un trapo. ATENCIÓN: Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Composición: etanol 45%, 2-propanol 15%, compuestos de amonio cuaternario 0,2%, glicoxal 0,2%

07 Desinfectante por pulverización con alcohol para a desinfeção de superficies de produtos médicos (p. ex. superficies resistentes ao álcool de unidades de tratamento dentário). Tempo de acção reduzido. Solução desinfectante pronta a usar. Sem formaldeído. Gama de acção/tempos de acção: acção virucida limitada (p. ex. HBV/HCV/HIV, Virus do Herpes Simplex Tipo I); 30 segundos; bactericida/leverculocida: 1 minuto; tuberculocida: 5 minutos. Modo

de usar: GREEN&CLEAN SD é pronto para uso. .Área de desinfeção deve ser pulverizada até o molhamento completo. Deixar secar. ATENÇÃO: Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. Composição: 45% etanol, 15% 2-propanol, 0,2% compostos de amónio quaternário, 0,2% glicoxal

08 Spredesinfektie op basis van alcohol voor de desinfectie van oppervlakken van medicijnproducten (bijv. oppervlakken van de tandheelkundige eenheid die ongevoelig zijn voor alcohol). Korte inwerktijd. Desinfectieoplossing die klaar is voor gebruik. Vrij van formaldehyde. Werkingsspectrum/inwerk tijden: beperkt virussen (bijv. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-virus type I); 30 seconden; bactericide/fungicide (C. albicans): 1 minuut; tuberculocide: 5 minuten. Gebruik: GREEN&CLEAN SD is klaar voor gebruik. Giet dit eenvoudig GREEN&CLEAN SD in de sproefjes van 750 ml. Het te desinfecterende oppervlak moet voor volledige bevochtiging worden ingesproeid. Het oppervlak zelf laten drogen. Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Samenstelling: 45% ethanol, 15% 2-propanol, 0,2% quaternaire ammoniumverbindingen, 0,2% glyoxal

09 Alkoholhaltig spray för desinfektion av ytor på medicintekniska produkter (t.ex. alkoholbeständiga ytor på dentalutrustning). Kort verkningsstid. Desinfektionslösning är klar att använda. Fri från formaldehyd. Aktivitetsspektrum och åtgärdsstider: begränsat virusdödande (t.ex. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-virus typ I); 30 sekunder; bakteriedödande/svampdödande: 1 minut; TBC-dödande: 5 minuter. Användningsrekommendation: GREEN&CLEAN SD är klar att använda. Det är bara att fylla i 750 ml-sprayflaskan från kanister. Den ytan som ska desinficeras, ska spredas tills den är helt våt. Låt behandlad yta torka på egen hand. Varning: Brandfarligt vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Sammensättning: 45% etanol, 15% 2-propanol, 0,2% kvartära ammoniumföreninger, 0,2% glyoxal

10 Alkoholipolitiinen desinfiointiainetta lääkinällisten laitteiden pintojen desinfiointia varten (esim. hammashoitoyksiköiden alkoholia kestävä pinnat). Lyhyt vaikutusaika. Käyttövalmis. Ei sisällä formaldehydiä. Tehoalue/virkitysala: Tehoa seuraavien viruksien: HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus, Influenssa A+B, H1N1, SARS; 30 sekuntia; bakteerisienet (C. albicans), MRSA; 1 minuutti; tuberkuloosi: 5 minuuttia täysin. GREEN&CLEAN SD on käyttövalmis. Täytä 750 ml:n suihkepullon kanisteri. Desinfiointiala pintojen on suukäyttävä, kunnes ne ovat kattoallaan märkiä. Anna pintojen kuivua itsestään. Varoitusta: Täyttyä neste ja höyry. Arsyttävä voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, säilytä pakkaus ja varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vaikuttavat aineet: 45% etanolia, 15% 2-propanolia, 0,2% kvaternääristä ammoniumyhdisteitä, 0,2% glyksaalia

11 Alkoholholdig spraydesinfeksjon for desinfisering av overflater på medisinske produkter (f.eks. alkoholbestandige overflater på dentalenheter). Kort virketid. Ferdig til bruk. Formaldehydfri. Virkningsspekter/virketid: begrenset virusdræbende middel (f.eks. HBV/HCV/HIV, herpes simplex-virus type-1); 30 sekunder; bakteriedræbende/soppdræber (C. albicans): 1 minutt; tuberkulose 5 minutter. Bruk: GREEN&CLEAN SD er klar til bruk. Fyll GREEN&CLEAN SD i 750 ml sprøyteflasken. Flaten som skal desinfiseres skal sprøytes komplett inn. La flaten tørke av seg selv. Advarsel: Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyereirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utlignegjeldig for barn. Sammensetning: 45% etanol, 15% 2-propanol, 0,2% kvaternære ammoniumforbindelser, 0,2% glyksal

12 Alkoholbaserat spraydesinfektion till överfläder, druckere og medicinske apparater (f.eks. overfläder på dentalenheder, der ikke er følsomme over for sprit). Kort aktionsid. Børstefærdig desinfektionsopløsning. Formaldehydfri. Virkningsspektrum/virkningstid: begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I); 30 sekunder; bakteriedræbende middel/svampedræbende middel (C. albicans): 1 minut; tuberkulosedræbende middel: 5 minutter. Ansgning: GREEN&CLEAN SD er klar til brug. Man fylder ganske enkelt dunk ned i 750 ml sprayflasken. Den overflade, der skal desinficeres, skal sprøjtes, så den er fuldstændigt fugtet. Derefter venter man, til overfladen er tørret ad sig selv. Advarsel: Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenerirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utlignegjeldig for børn. Sammensætning: 45% ethanol, 15% 2-propanol, 0,2% kvaternære ammoniumforbindelser, 0,2% glyoxal

E1 Akoolohóu fekažoéno apotamnióko yia tía apotámhshn epifanévwn ístrikwon proíwtwn (p.t.x., anektikwn sto ónimevra epifanévwn tñs ódoniatríkhñs monádh). Súntou díasthma dráshñs. Étoiou proç chrñsh díasthma apotamnióko. Den perieíve formaldehíd. Periochí dráshñs/chrónoi dráshñs: ioktóno periorismévno fásmatos (p.t.x. HBV/HCV/HIV, Eritíptioú Títou I): 30 ðeuteróléptoi; ðaktérioktóno, mikrótktóno (C. albicans): 1 léptoi; psuhtoktóno: 5 léptoi. Chrñsh: To GREEN&CLEAN SD éina étoiou proç chrñsh. Apólw pñwérntē tñ fíalē fekažoú 750 ml apó to kánistrou. H proç apotámhshn epifanévwn prépei na fekažoúvetai yia tñ plhrē díoxorhñ tñs. Afíntē tñ epifánē na stegnoúvetai. **ΠΡΟΣΧΕΔΙΩ:** Υγρό ka tñ σφύλακτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Σύνθεση: 45% ethanol, 15% 2-propanol, 0,2% ενυδατισμένο τεταροεταγώκο αμμωνίου, 0,2% γλυκόζη

PL Alkoholohy środków w aerozolu do dezynfekcji powierzchni produktów medycznych (np. nieważących na alkohol powierzchni unitów stomatologicznych). Skrzybić czas działania. Gotowy do użycia roztwór dezynfekcyjny. Bez formaldehydu. Spektrum działania/czas działania: ograniczone wirusobójcze (np. HBV/HCV/HIV): 30 sekund; bakterioobójcze/grzybobójcze (C. albicans): 1 minuta; praktykujące: 5 minut. Stosowanie: GREEN&CLEAN SD jest gotowy do użycia. Przelazć z kanistra do butelki rozpryskającej o pojemności 50 ml. Powierzchnie, która ma zostać poddana dezynfekcji, należy całkowicie spryskać. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Latwopalna ciecz i para. Działa drażniaco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Skład: 45% etanolu, 15% 2-propanolu, 0,2% czwartorzędowe związki amoniowe, 0,2% glikoza

C5 Alkoholický prípravok pro dezinfekci povrchu lékařských produktů postřikem (např. povrchů dentální jednotky, odolných vůči alkoholu). Krátká doba působení. Dezinfekční roztok připravený k použití. Bez formaldehydu. Spektrum účinnosti/doby působení: omezené virucidní (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 30 sekund; baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 1 minuta; proti tuberkulóze: 5 minut. Použití: GREEN&CLEAN SD je připraven k použití. Napiňte jej prostě z kanystru do rozprašovače láhve o objemu 750 ml. Dezinfikovanou plochu je třeba nastříkat, až bude zcela mokrá. Někde nechte samovolně vyschnout. Varnování: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šítek výrobku. Uchovejte mimo dosah dětí. Složení: 45% etanolu, 15% 2-propanolu, 0,2% kvartérní amoniové sloučeniny, 0,2% glyxol

E1 Dezinfekcia postrekom na báze alkoholu na dezinfekciu ploch zdravotníckych pomôcok (napr. povrchy stomatologickej správy odolné voči alkoholu). Krátka doba pôsobenia. Dezinfekčný roztok pripravený na použitie. Bez obsahu formaldehydu. Dôbly pôsobenia/spektrum: obmedzené virucidný (napr. HBV/HCV/HIV, herpes simplex typu I): 30 sekund; baktericidný, fungicidný (C. albicans): 1 minúta; tuberkulóza: 5 minút. Použitie: Prípravok GREEN&CLEAN SD dodáva pripravený na použitie. Jednoduchou ho naplníte z nádoby do 750 ml rozstrekačovej fľaše. Dezinfikovanú plochu postriekajte tak, aby bola úplne zvlhčená. Plochu nechajte samovoľne vyschnúť. Varnovanie: Hoľavá kapalina a pary. Způsobuje vážne podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šítek výrobku. Uchovejte mimo dosah dětí. Složení: 45% etanolu, 15% 2-propanolu, 0,2% kvartérní amoniové sloučeniny, 0,2% glyxol

E1 Alkoholohy rozpršilno razukózo yia razukúzevanje površín medicinských izdelkov (npr. na alkohol neobčutlivje površine zobozdravnstvenih enot). Kratek čas učinkovanja. Za uporabo pripravljena razkuževalna raztopina. Brez formaldehida. Spreterčično učinkovanje: omejen virucidni učinek (npr. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex tipa I): 30 sekund; baktericidno/fungicidno (C. albicans): 1 minuta; tuberkulozoidi: 5 minut. Uporaba: Razkužilo GREEN&CLEAN SD je pripravljeno za uporabo. Razkužilo enostavno preljevite v 750-mililitrsko razpršilno steklenico. Stekleniko, ki je želite razkužiti, je treba napršiti, tako da bo popolnoma navlažena. Pustite, da se steklenico usušijo. Pozor: Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, morate biti na voljo posoda ali etiketa proizvalca. Hraniti zunaj dosega otrok. Sestava: 45% etanolu, 15% 2-propanola, 0,2% kvaternarne amonijeve spojine, 0,2% glikoza

HR Alkoholni dezinfekcijski sprej za dezinficiranje površina medicinskih proizvoda (npr. površina stomatoloških uređaja neosjetljivih na alkohol). Kratko vrijeme djelovanja. Dezinfekcijska otopina pripremljena za uporabu. Ne sadrživa formaldehid. Vrijeme djelovanja/spektar: ograničeno učinkovito (npr. HBV/HCV/

HIV, virus herpes simplex tipa I): 30 sekundi; baktericidan, fungicidan (C. albicans): 1 minuta; tuberkulozoidi: 5 minuta. Primjena: Sredstvo GREEN&CLEAN SD pripremljeno je za uporabu. Jednostavno ga preljevite iz spremnika u raspršivač od 750 ml. Površinu za dezinficiranje poprskajte dok se potpuno ne namoči. Pustite površinu da se sama osuši. Pozor: Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili nalepniku. Čuvati van dohvata djece. Sastav: 45% etanol, 15% 2-propanola, 0,2% kvaternarni amonijevih spojeva, 0,2% glikoza

E1 Alkoholhaltarntu fertóntópermet orvosi termékek felületének fertőtlenítéséhez (pl. fogászati egységek alkoholál felületre). Rövid betáhtási idő. Használatra kész fertőtlenítő oldat. Formaldehidmentes. Kifejelítet hatóanyagok: korlátozott vírusölő (pl. HBV/HCV/HIV, közönséges, I. típusú herpesvírus); 30 másodperc; bakteriumölő/gombáölő (C. albicans): 1 perc; gombaszölő: 5 perc. Alkalmazás: A GREEN&CLEAN SD használatra kész. Egyszerűen töltse be a tartályból a 750 ml-es peremező palackba Adig peremzetten a fertőtlenítenő felületre, amíg az anyag teljesen be nem vonytja át. Hagyja magától megszáradni a felületet. Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gáz. Súlyos szemirritációt okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartás kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Összetétel: 45% etanol, 15% 2-propanol, 0,2% kvaterner ammónium-vegyületek, 0,2% glikoz

E1 Alkoholone desinficieremisipnis meditsinootode pealispindade desinficieremiseks (nt dentálne uskuse alkoholindaj pealispinnad). Lühike toimeaeg. Kasutusvalmis desinfektantsioolihlas. Formaldehidivaba. Desinfitseerimis spekter/toimeajad: piiratud viiruste-kalite (nt HBV/HCV/HIV, herpesvirus tüüp I): 30 sek; bakteritsiidne/fungitsiidne (C. albicans): 1 minut; tuberkuloosivastane kalite: 5 minutit. Kasutamine: GREEN&CLEAN SD on kasutusvalmis. Valage lihtsalt kanistrist 750 ml piustusudelisisse. Desinfitseerivat pind tuleks täielikult mürgumiseks sisse pihustada. Laske pinna iseseisvalt kuivada. Hoiatust: Tuleohütel vedelik ja gaas. Põhustab tugevat silmade ärritust. Arsti poolt pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatu kohas.

E1 Spiritu saturós sminidázimas dezinfekcijas līdzeklis, kas paredzēts medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai (piemēram, zobārstniecības iekārtas virsmas, kas nav jutīgas pret spirtu). Ies iedarbības laiks. Gatavs lietošanai dezinficējošais šķidrums. Nesatur formaldehīdu. Dezinfektanta spektrs/iedarbības laiks: ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss); 30 sekundes; baktericidns/fungicidns (C. albicans): 1 minūte; tuberkulozidns: 5 minūtes. Lietošana: GREEN&CLEAN SD ir gatavs lietošanai. Iepildiet to vienkrāsi no kannas 750 ml smidzinātājā. Dezinficējamaj virsmu vajadzētu apsmidzināt līdz pilnīgai samitrināšanai. Ļaujiet virsmai paštīrīties nožūt. Uzmanību: zīdēsnošs šķidrums un tvaiki, izraisīta nopietnu acu kairinājumu. Medicīniskā palīdzība nepieciešama gadījumā, ja attīstās informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvs: 45% etanol, 15% 2-propanol, 0,2% ceturtējā amonija savienojumi, 0,2% glikoāls

E1 Alkoholohy turiní purškima dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos prietaisų paviršiams (pvz., odontologinės įrangos alkoholiui nejautriems paviršiams) dezinfekcijai. Trumpa poveikio trukmė. Naudoti paviršius dezinfekavimui tirpalas. Be formaldehidų. Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: ribotas virusicidinis (pvz. HBV/HCV/HIV, I tipo paprastasis herpes virusas); 30 sek. baktericidinis/fungicidinis (C. albicans): 1 min; tuberkulocidinis: 5 min. Naudojimas: GREEN&CLEAN SD yra paruoštas naudoti. Pripilkite ju tiesiog iš kanistro arba butelį į 750 ml purškiamo butelį. Paviršius, kurį reikia dezinfekuoti, reikėtų purškėti, kol jis pilnintai sudrėks. Paviršius leisti išdžiūti savaime. Atsargiai: Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų aki dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produktą talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtis: 45% etanolio, 15% 2-propanolio, 0,2% kvartiriniai amonio junginiai, 0,2% glikoazolis

E1 Sthótreinsifinē mē alkohóli fyrir sthótreinsun a fyrirbórti iekaingatazējka (t.d. fyrirbórti jannleknastós sem pola alkohóli). Fjótívríkt. Sthótreinsifinsun tilbúin til notkunar. An formaldehíds. Vírknívísu /límar. Tarmkróuú virkni gegn virusum (t.d. HBV/HCV/HCV, herpes simplex virus gerð I): 30 sekúndur; bakteríudregandi, sveppadregandi (C. albicans): 1 minúta; bakteríadregandi: 5 mínútur. Notkunur: GREEN&CLEAN SD er tilbúit til notkunar. Fyllíð einfallega 750 ml á úðaúfiskunna ú lílitinu. Fyrirbórt sem áu á sthótreins þarf úða á þar til þer er alveg blaut. Leyfið fyrirbórtinu að þorna sjálfu. VARUÐ: Vökvi og erldur efndur. Veldur alvarlegi augneringni. Ef þórf er á læknaástoð skil sýna umhöndir ús merkinu. Geymist þar sem börn nétt á. Samsetning: 45% etanol, 15% 2-própanól, 0,2% kvartar amóníakbólundur, 0,2% Glyxol